

User manual

MANUEL D'UTILISATION
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE

Mia



Toiletzitverhoger Mia

Bedankt voor uw vertrouwen in de producten van Vermeiren. Om u te ondersteunen bij het gebruik van dit product, bieden we u deze handleiding aan. Lees deze informatie zorgvuldig door. Indien u na het lezen van deze handleiding nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw vakhandelaar. Op onze website <http://www.vermeiren.com/> kan u steeds de meest recente versie terugvinden van de informatie in deze handleiding. Consulteer deze website regelmatig voor mogelijke updates. Mensen met een visuele beperking kunnen de elektronische versie van deze handleiding downloaden en laten voorlezen door een tekst-naar-spraak programma.

1 Bij levering

Pak het product uit en controleer of de levering volledig is. In het pakket zitten:

- 1 toiletzitverhoger met deksel
- 2 breedteverstellers
- Optioneel: toiletzit kussen
- Handleiding

Controleer de zending zorgvuldig op transportschade. Wanneer blijkt dat uw product een defect vertoont, neem dan contact op met de transporteur.

2 De toiletzitverhoger installeren en gebruiken

**VOORZICHTIG**

Gevaar voor letsel

- Zorg er voor ieder gebruik voor dat de toiletzitverhoger goed bevestigd is op het toilet.
- Om ervoor te zorgen dat de toiletzit goed bevestigd blijft, zet u best wekelijks de breedteverstellers even los en weer vast.
- Overschrijd het maximale gebruikersgewicht niet.

Indicaties en contra-indicaties: De toiletzitverhoger werd ontworpen om de zithoogte van een toilet te verhogen voor meer comfort, en om het neerzitten en rechtopstaan te vergemakkelijken, bijvoorbeeld in geval van: een functiebeperking in de onderste ledematen door beperkte of geen gewrichtsmobiliteit, verminderde spierkracht in de onderste ledematen, beschadiging van de lendenwervelkolom, beschadiging van het zenuwstelsel,... Het doel van dit product is om


onafhankelijk of meer onafhankelijk toiletgebruik mogelijk te maken. Bij normaal gebruik zijn er geen contra-indicaties bekend

Mia is beschikbaar in 2 mogelijke zithoogtes: 10cm en 15 cm.

Het maximale gebruikersgewicht voor de toiletzitverhoger is 225 kg.

Om Mia te installeren:

1. Doe het deksel en de toiletbril omhoog. Indien nodig, verwijder bril en deksel.
2. Steek de breedteverstellers (1) op hun plaats in de toiletzitverhoger. Draai de sterknop met de klok mee om de breedte een beetje te verminderen.
3. Plaats de zitverhoger op de toiletrand [A] met de vleugel (2) aan de buitenzijde.
4. Duw de zitverhoger zo ver mogelijk naar achter [B].
5. Draai de breedteverstellers (1) met de hand stevig aan.

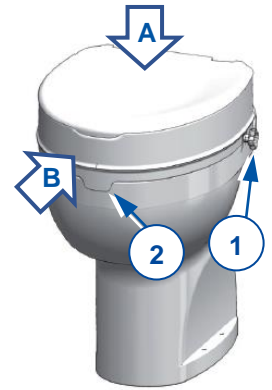

Om het optionele kussen te plaatsen, dient u eerst het deksel van de toiletzitverhoger af te nemen.

Laat uzelf langzaam zakken bovenop de gemonteerde toiletzitverhoger door uw ellebogen, heupen en indien mogelijk uw knieën te plooiën. Houd de zitverhoger niet vast als steun bij het gaan zitten/opstaan.

3 Onderhoud

Uw toiletzitverhoger is opgebouwd uit plastic onderdelen. Mia kan gereinigd en gedesinfecteerd worden met normale huishoudelijke producten. Gebruik geen agressieve producten die beschadigingen kunnen veroorzaken.

3.1 Verwachte levensduur

De toiletzitverhoger is ontwikkeld voor een gemiddelde levensduur van 5 jaar.

4 Technische specificaties

Merk	Vermeiren
Type	Toiletzitverhoger
Model	Mia

Omschrijving	Afmetingen
Max. belading	225 kg
Toegevoegde zithoogte	100 mm 150 mm
Breedte	365 mm
Lengte	405 mm
Opslagtemperatuur	+5°C - +41°C

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen te introduceren.
Meettolerantie, +/- 15 mm / 1,5kg / 1,5°.



Vermeiren GROUP
Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout
BE

website: www.vermeiren.com

Instructies voor de vakhandelaar

Deze handleiding is deel van het product en dient bij iedere product te worden geleverd.

Versie: B, 2022-07

Basic UDI: 5415174 120903Mia GW

Alle rechten, inclusief vertaling, voorbehouden.