

Illico

Elektrisch verstelbaar
verzorgingsbed



VERMEIREN
we care for you


Illico

Comfortabel en praktisch

- Hoogte aanpassing lattenbodemp, 298 mm tot 828 mm
- Volledig elektrisch verstelbaar met de geleverde besturing
- Elektrische verstelling van het hoofdgedeelte
- Elektrische knieknik, het voetengedeelte kan manueel worden aangepast
- Matrasmaat 900 mm x 2000 mm
- Handbediening met vergrendeling functie
- Maximum laadvermogen 170 kg (patiënt en matras)
- Twee paar onrusthekken
- Bedheffer kan links of rechts worden gemonteerd
- Vier zwenkwielen met aparte remmen
- Verschillende voor- en achterpanelen in hout
- Eenvoudige montage en demontage
- Transportset beschikbaar




Gebbruiksvriendelijke handbediening met vergrendelfuncties

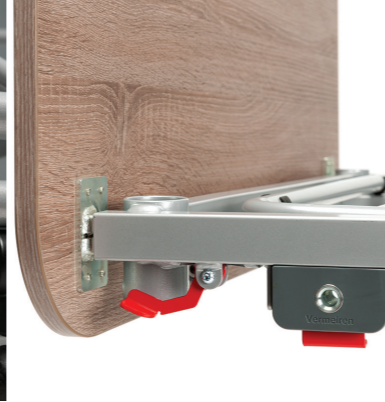

Snelle demontage van de panelen en onrusthekken



Robuuste wielen met vergrendeling

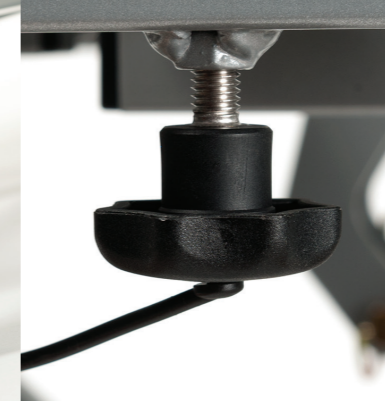

Grote, stervormige, schroeven voor snelle (de)montage van het bedkader



Transportkit op wielen voor eenvoudige opslag



Demontage van het bedframe zonder extra gereedschappen



De bedheffer kan zowel links als rechts van het bedkader geplaatst worden. Het optreksysteem is tevens regelbaar in lengte.



4 matras houders (2 aan het hoofdgedeelte en 2 aan het voetengedeelte) houden de matras perfect op z'n plaats.

Eén enkele druk op de knop om de onrusthekken te verlagen



De bediening is voorzien van een lang verlengsnoer zodat deze overal in de buurt van het bed kan worden gebruikt.

Het voetengedeelte kan manueel verstelt worden in verschillende hoogtes.



GEMAKKELIJKE montage zonder extra gereedschappen

Gedaan met zoeken naar de juiste schroevendraaiers of passende inbussleutels bij het Illico bed. Eén persoon en enkele minuten tijd zijn voldoende om het Illico bed te monteren of te demonteren. Neem de onrusthekken weg, verwijder de houten panelen, demonteer het bedkader en klaar.




Verschillende bedpanelen, verschillende onrusthekken

Voor een perfecte integratie bij uw bestaand interieur kan het Illico bed uitgerust worden met oxide of beech panelen.



Opties

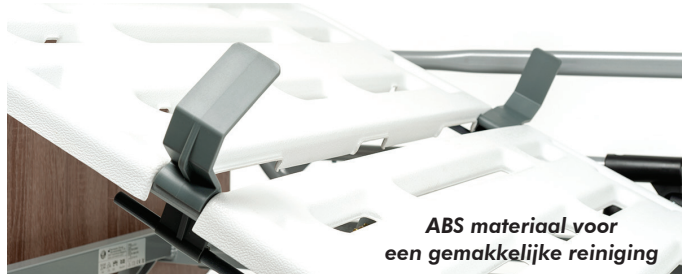

ABS materiaal voor een gemakkelijke reiniging



Centrale voetrem of 4 geremde zwenkwielen



Muurbeschermers



Verlengstuk (20 cm) voor het ligvlak

Technische informatie

■ Totale breedte	1024 mm
■ Totale hoogte	783 - 1313 mm
■ Totale lengte	2080 mm
■ Hoogte van de bedkader (zonder matras)	298 - 828 mm
■ Max. hoek van het hoofdgedeelte	70°
■ Max. hoek voor de bovenbenen	36,8°

Deelbare onrusthekken

Onze Illico bedden zijn ook verkrijgbaar met optionele deelbare onrusthekken, in metaal of in hout, afhankelijk van uw configuratie.



Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet het Illico bed aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

■ Max. hoek voor de onderbenen	-17,2°
■ Max. belasting bedheffer	75 kg
■ Gewicht (excl. onrusthekken, bedheffer en triangel)	85 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	135 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.